

FICHA TÉCNICA - CERTOFIX® PAED

FAMÍLIA DE CATETERES VENOSOS CENTRAIS

Conjunto de cateter venoso central em poliuretano Certon, com superfície suave, radiopaco e elevada flexibilidade e biocompatibilidade; com agulha para punção por técnica de Seldinger; fio guia em Nitinol à prova de dobras; dispositivo para posicionamento da ponta do cateter em tempo real por ECG Intracavitário; curativo de fixação livre de sutura; clip de fixação de base macia e antiderrapante; conectores valvulados; dilatador, bisturi e seringa.

CLIP DE FIXAÇÃO ANTIDERRAPANTE

Clip de fixação ajustável de base macia, confortável e antiderrapante para maior resistência à tração e proteção contra perda acidental do cateter.

SAFSITE® CONECTORES VALVULADOS LIVRES DE AGULHA LUER LOCK

PINÇAS CORTA FLUXO

EXTREMIDADES DOS LÚMENS LUER LOCK IDENTIFICADO POR CORES

CURATIVO DO URSINHO - FIXADOR LIVRE DE SUTURAS*

MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE


PONTA MACIA E FLEXÍVEL

LINHAS EXTENSORAS TRANSPARENTES

LÚMENS COM OTIMIZAÇÃO DE DESIGN PARA ALTOS FLUXOS E MAIS PROTEÇÃO CONTRA ESTREITAMENTOS E OCLUSÃO.

Mono


Duo

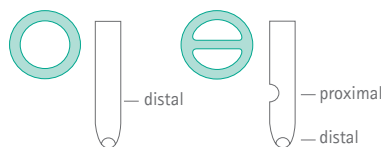

ACESSÓRIOS:

FIO GUIA

Em Nitinol à prova de dobras, altamente resistente, permite o deslizamento suave e facilita a colocação do cateter, mesmo em situações anatômicas extremas, sem deformar; conta com marcações de profundidade e pontas em J e reta flexíveis. Acompanha dispenser.

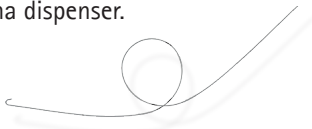

AGULHA DE PUNÇÃO

Para técnica de Seldinger, extremidade luer lock para conexão segura com a seringa, indicador da direção do bisel e padrão de cor ISO.



CERTODYN® - ADAPTADOR UNIVERSAL

Cabo eletrodo para posicionamento preciso e em tempo real da ponta do cateter por técnica de ECG Intracavitário.



Consulte seu vendedor B. Braun para mais informações.

✓ INDICAÇÃO DE USO/ FINALIDADE:

Cateterização da veia cava superior utilizando a técnica de Seldinger para:

- Terapia de infusão prolongada e nutrição parenteral;
- Aplicação de soluções hiperosmolares ou extremamente irritantes para a veia;
- Monitorização da pressão venosa central;
- Impossibilidade da punção venosa periférica.

✓ MATÉRIAS PRIMAS:

ABS, PA, PE, PP, PUR, PC, TPE, EP, PI e aço inoxidável.

✓ PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

Não submeter o cateter Certofix® a pressões superiores a 3 bar.

✓ CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO:

- Temperatura ambiente: 15 - 25°C;
- Umidade relativa do ar: 50 - 60%;
- Proteger da luz direta;
- Utilizar o produto até a data do vencimento indicada na embalagem.

✓ ESTERILIZAÇÃO:

Óxido de Etileno

✓ VALIDADE:

5 anos



Responsável Técnica: Sonia M. Q. de Azevedo | CRF- RJ 4260

CERTOFIX® PAED

CARACTERÍSTICAS		CERTOFIX® MONO PAED S110 4160177-04	CERTOFIX® DUO PAED S413 4166922-07	CERTOFIX® DUO PAED S420 4166949-07	CERTOFIX® DUO PAED S513 4167139-07	CERTOFIX® DUO PAED S520 4167155-07
CATETER	Lúmen	1	2	2	2	2
	French (Fr)	3	4	4	5	5
	Comprimento (cm)	10	13	20	13	20
	Gauge Lumen	22 G	22/ 22 G	22/ 22 G	18/ 20 G	18/ 20 G
	Fluxo Min. (ml/min)	15	10/ 10	09/ 09	22/ 11	18/ 09
	Volume Priming (ml)	0.1	0.28/ 0.22	0.3/ 0.28	0.3/ 0.27	0.35/ 0.28
	Diâmetro Externo (mm)	0.9	1.2	1.2	1.7	1.7
AGULHA INTRODUTORA	Modelo	Não Valvulada	Não Valvulada	Não Valvulada	Não Valvulada	Não Valvulada
	Gauge	21	21	21	21	21
	Medidas	0.8 X 38mm	0.8 X 38mm	0.8 X 38mm	0.8 X 38mm	0.8 X 38mm
FIO GUIA	Comprimento (cm)	25	50	50	50	50
	Diâm. (mm)	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
ACESSÓRIOS	Dilatador (Fr)	-	5	5	6	6
	Safsite®	*	2	2	2	2
	Bisturi	1	1	1	1	1
	Seringa 5ml	**	1	1	1	1
	Curativo Ursinho Livre Suturas	1	1	1	1	1
	Certodyn® Cabo	1	1	1	1	1
QTD/CAIXA	Und.	10	10	10	10	10

* 1 Perfusor + 01 Discofix

**Seringa 3ml

B. Braun Brasil | S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br

Família de cateteres venosos centrais e acessórios: - Registro ANVISA no.: 80136990671

