


# FICHA TÉCNICA - CERTOFIX® HIGH FLOW

## FAMÍLIA DE CATETERES VENOSOS CENTRAIS


Conjunto de cateter venoso central em poliuretano Certon, para alto fluxo de infusão com superfície suave, radio-paco e elevada flexibilidade e biocompatibilidade; com agulha valvulada para punção em sistema fechado por técnica de Seldinger; fio guia em Nitinol à prova de dobras; dispositivo para posicionamento da ponta do cateter em tempo real por ECG Intracavitário; clip de fixação de base macia e antiderrapante; conectores valvulados; dilatador, bisturi e seringa.

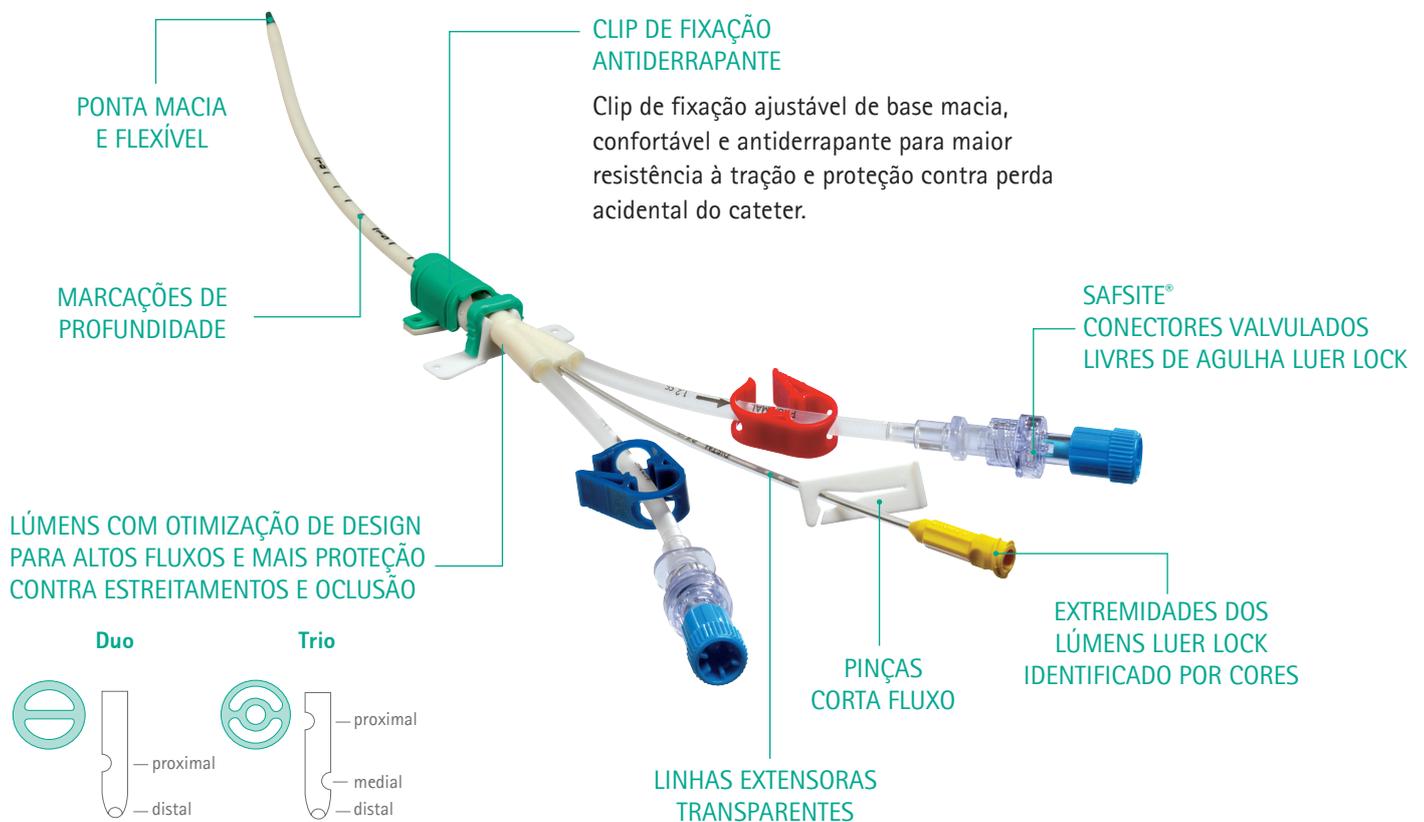

### ACESSÓRIOS:

#### FIO GUIA

Em Nitinol à prova de dobras, altamente resistente, permite o deslizamento suave e facilita a colocação do cateter, mesmo em situações anatômicas extremas, sem deformar; conta com marcações de profundidade e pontas em J e reta flexíveis. Acompanha dispenser.

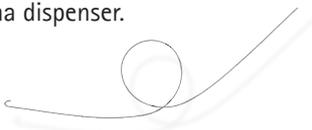

#### AGULHA VALVULADA

Permite a passagem do fio guia e aspiração de sangue sem desconexão da seringa para punção mais limpa, segura e rápida em sistema fechado por técnica de Seldinger.



#### CERTODYN® - ADAPTADOR UNIVERSAL

Cabo eletrodo para posicionamento preciso e em tempo real da ponta do cateter por técnica de ECG Intracavitário.



Consulte seu vendedor B. Braun para mais informações.

✔ **INDICAÇÃO DE USO/ FINALIDADE:**

Cateterização da veia cava superior utilizando a técnica de Seldinger para:

- Terapia de infusão prolongada e nutrição parenteral;
- Aplicação de soluções hiperosmolares ou extremamente irritantes para a veia;
- Monitorização da pressão venosa central;
- Impossibilidade da punção venosa periférica.

✔ **MATÉRIAS PRIMAS:**

ABS, PA, PE, PP, PUR, PC, TPE, EP, PI e aço inoxidável.

✔ **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:**

Não submeter o cateter Certofix® a pressões superiores a 3 bar.

✔ **CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO:**

- Temperatura ambiente: 15 - 25°C;
- Umidade relativa do ar: 50 - 60%;
- Proteger da luz direta;
- Utilizar o produto até a data do vencimento indicada na embalagem.

✔ **ESTERILIZAÇÃO:**

Óxido de Etileno

✔ **VALIDADE:**

5 anos



Responsável Técnica: Sonia M. Q. de Azevedo | CRF- RJ 4260

CERTOFIX® HIGH FLOW

CARACTERÍSTICAS		CERTOFIX® DUO HF V1215 4167538-07	CERTOFIX® DUO HF V 1220 4167546-07	CERTOFIX® TRIO HF V 1220 4160622-07
CATETER	Lúmen	2	2	3
	French (Fr)	12	12	12
	Comprimento (cm)	15	20	20
	Gauge Lúmen	11/ 11G	11/ 11G	16/ 12/ 12G
	Fluxo Min. (ml/min)	260/ 260	230/ 230	55/ 165/ 165
	Volume Priming (ml)	1.2/ 1.2	1.35/ 1.3	0.44/ 1.13/ 1.1
	Diâmetro Externo (mm)	4.0	4.0	4.0
AGULHA INTRODUTORA	Modelo	Valvulada	Valvulada	Valvulada
	Gauge	18	18	18
	Medidas	1.3 X 70mm	1.3 X 70mm	1.3 X 70mm
FIO GUIA	Comprimento (cm)	50	50	50
	Diâm. (mm)	0.89	0.89	0.89
ACESSÓRIOS	Dilatador (Fr)	12	12	12
	Safsite®	2	2	3
	Bisturi	1	1	1
	Seringa 5 ml	1	1	1
	Certodyn® Cabo	1	1	1
QTD POR CAIXA	Und.	10	10	10

B. Braun Brasil | S.A.C: 0800 0227286 | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)

Família de cateteres venosos centrais e acessórios - Registro ANVISA no.: 80136990671

