


FICHA TÉCNICA - CERTOFIX® PADRÃO

FAMÍLIA DE CATETERES VENOSOS CENTRAIS


Conjunto de cateter venoso central em poliuretano Certon, com superfície suave, radiopaco e elevada flexibilidade e biocompatibilidade; com agulha valvulada para punção em sistema fechado por técnica de Seldinger; fio guia em Nitinol à prova de dobras; dispositivo para posicionamento da ponta do cateter em tempo real por ECG Intracavitário; clip de fixação de base macia e antiderrapante; conectores valvulados; dilatador, bisturi e seringa.

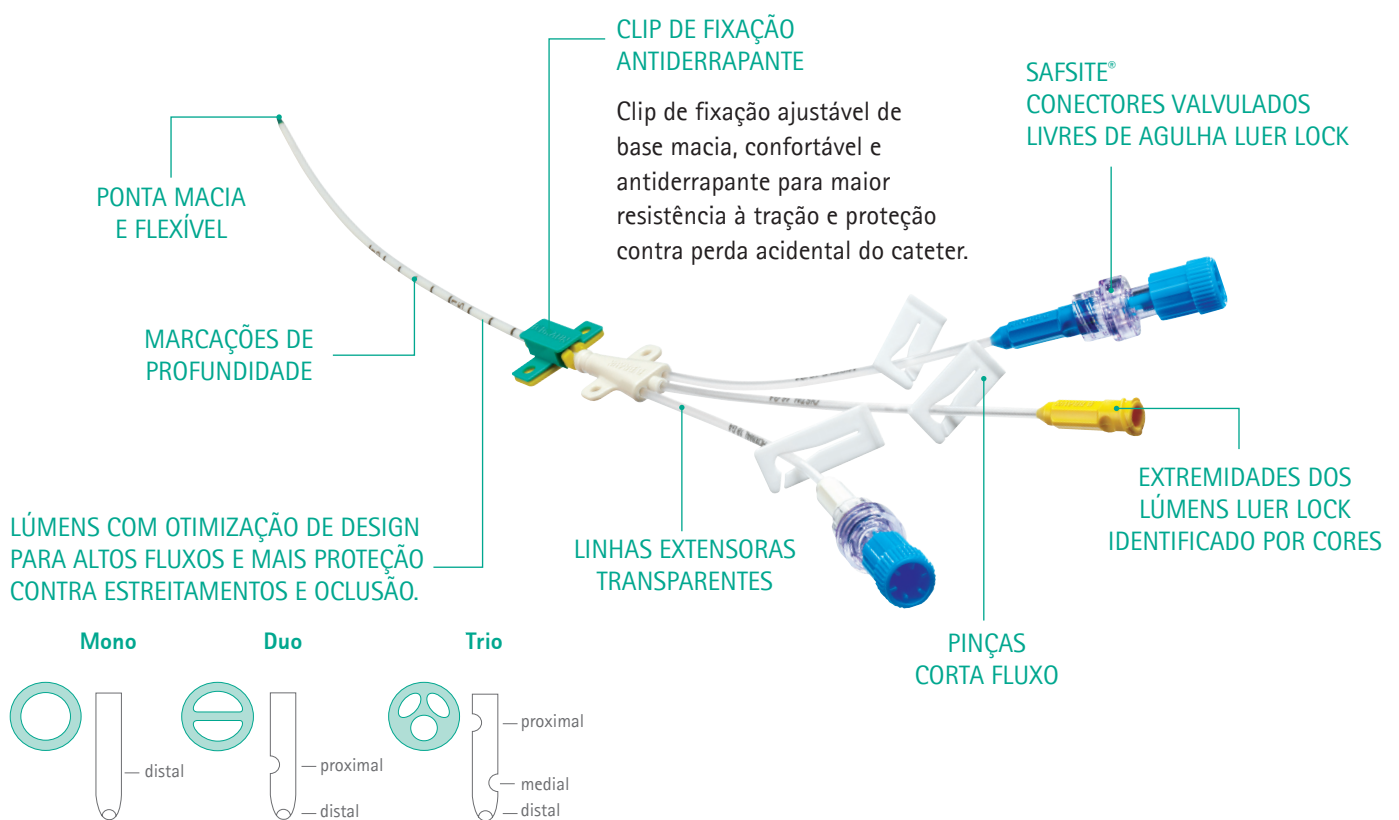

ACESSÓRIOS:


FIO GUIA

Em Nitinol à prova de dobras, altamente resistente, permite o deslizamento suave e facilita a colocação do cateter, mesmo em situações anatômicas extremas, sem deformar; conta com marcações de profundidade e pontas em J e reta flexíveis. Acompanha dispenser.

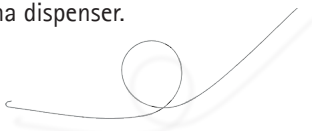

AGULHA VALVULADA

Permite a passagem do fio guia e aspiração de sangue sem desconexão da seringa para punção mais limpa, segura e rápida em sistema fechado por técnica de Seldinger.

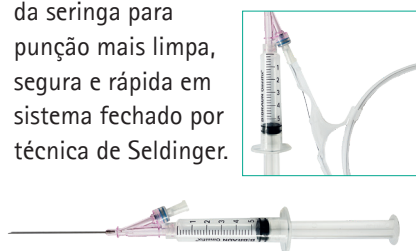

CERTODYN® - ADAPTADOR UNIVERSAL

Cabo eletrodo para posicionamento preciso e em tempo real da ponta do cateter por técnica de ECG Intracavitário.



Consulte seu vendedor B. Braun para mais informações.

✔ **INDICAÇÃO DE USO/ FINALIDADE:**

Cateterização da veia cava superior utilizando a técnica de Seldinger para:

- Terapia de infusão prolongada e nutrição parenteral;
- Aplicação de soluções hiperosmolares ou extremamente irritantes para a veia;
- Monitorização da pressão venosa central;
- Impossibilidade da punção venosa periférica.

✔ **MATÉRIAS PRIMAS:**

ABS, PA, PE, PP, PUR, PC, TPE, EP, PI e aço inoxidável.

✔ **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:**

Não submeter o cateter Certofix® a pressões superiores a 3 bar.

✔ **CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO:**

- Temperatura ambiente: 15 - 25°C;
- Umidade relativa do ar: 50 - 60%;
- Proteger da luz direta;
- Utilizar o produto até a data do vencimento indicada na embalagem.

✔ **ESTERILIZAÇÃO:**

Óxido de Etileno

✔ **VALIDADE:**

5 anos



Responsável Técnica: Sonia M. Q. de Azevedo | CRF- RJ 4260

CERTOFIX® STANDARD

CARACTERÍSTICAS		CERTOFIX® MONO V220 4160215-07	CERTOFIX® MONO V320 4160266-07	CERTOFIX® MONO V330 4160290-07	CERTOFIX® MONO V420 4160320-07	CERTOFIX® DUO V 720 4161211-07	CERTOFIX® DUO V 730 4161319-07	CERTOFIX® TRIO V 730 4163311-07
CATETER	Lúmen	1	1	1	1	2	2	3
	French (Fr)	4	5	5	6	7	7	7
	Comp. (cm)	20	20	30	20	20	30	30
	Gauge Lúmen	18 G	16 G	16 G	14 G	16/ 16G	16/ 16G	16/ 18/ 18G
	Fluxo Min. (ml/min)	18	52	40	80	55/45	52/37	38/18/18
	Volume Priming (ml)	0.3	0.43	0.51	0.51	0.48/ 0.39	0.61/ 0.48	0.5/ 0.4/ 0.38
	Diâmetro Externo (mm)	1.4	1.7	1.7	2.1	2.4	2.4	2.4
AGULHA INTRODUTORA	Modelo	Valvulada	Valvulada	Valvulada	Valvulada	Valvulada	Valvulada	Valvulada
	Gauge	20	18	18	18	18	18	18
	Medidas	0.9 X 50mm	1.3 X 70mm	1.3 X 70mm	1.3 X 70mm	1.3 X 70mm	1.3 X 70mm	1.3 X 70mm
FIO GUIA	Comp. (cm)	50	50	70	50	50	70	70
	Diâm. (mm)	0.63	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
ACESSÓRIOS	Dilatador (Fr)	5	6	6	8	8	8	8
	Safsite®	-	-	-	-	2	2	3
	Bisturi	-	-	-	-	1	1	1
	Seringa 5ml	1	1	1	1	1	1	1
	Certodyn® Cabo	1	1	1	1	1	1	1
QTD \ CAIXA	Und.	10	10	10	10	10	10	10

B. Braun Brasil | S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br

Família de cateteres venosos centrais e acessórios: - Registro ANVISA no.: 80136990671

