




ET

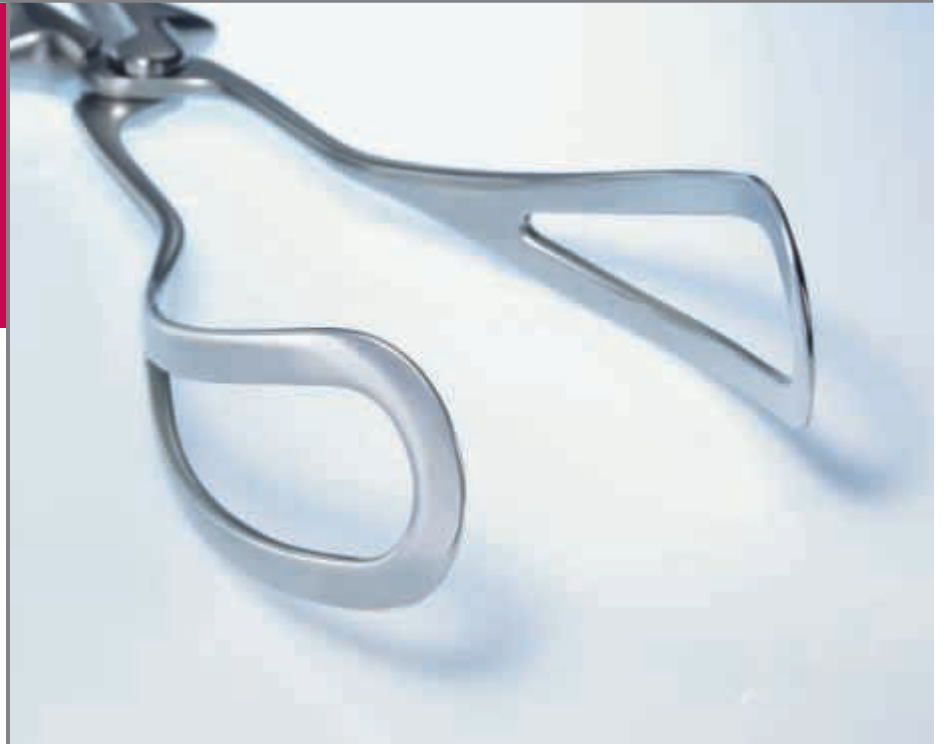

Geburtshilfe
Obstetrics

Geburtshilfe – Obstetrics

Beckenzirkel

Pelvimeters



DE LEE

ET005R

Beckenzirkel mit Zentimeter- und Zolleinteilung für innere Messungen zwischen Symphyse und Promontorium

Pelvismeter graduated in centimeters and inches for interior measurements between symphysis and promontory

$\frac{1}{2}$



MARTIN

ET073R

mit Zentimetereinteilung
graduated in centimeters

$\frac{1}{3}$



SCHMELZ


ET002

Rechenscheibe
Gestation calculator

$\frac{1}{3}$

Nach Applikation der Führungshülse am Injektionsort wird die Kanüle (mit aufgesetzter Spritze) durch den Trichter bzw. durch die Hülse hindurchgeführt und ins Gewebe eingestochen. Verletzungen der Vagina werden dabei vermieden. Die Einstichtiefe ist auf ca. 10 mm begrenzt. Ein Daumenring sowie eine kleine Stütze für Zeige- oder Mittelfinger dienen zur besseren Handhabung. Der Daumenring ist auf der Führungshülse verschiebbar und kann mit einer Rändelmutter – für jede Hand passend – fixiert werden. Die Fingerstütze läßt sich um die Führungshülse drehen und ermöglicht dadurch die Verwendung sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Außerdem kann die Fingerstütze – evtl. bei der Pudendusanästhesie – ganz aus dem Aktionsbereich heraus in Richtung Daumenring geschoben werden.

When the guide sheath is introduced at the spot to be injected the needle (mounted on the syringe) is passed through the guide sheath and the tissue is finally injected. Injuries of the vagina are thus avoided. Depth of puncture is limited to 10 mm. Thumb ring as well as a small support for middle- or forefinger facilitate the handling. Thumb ring slides on the guide sheath and can be fixed by a knurled nut to any size of the hand. The finger support can be turned round on the guide sheath so left-handers can use it, too. Completely away from the range of actions is the finger support when it is moved towards the thumb ring, e.g. for anesthesia of the pudendus.

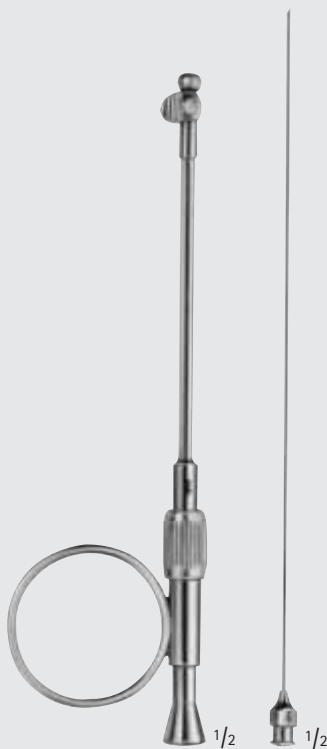

ET096R

Führungshülse
Guide sheath
175 mm, 7"

SR580R

Injektionskanüle Luer-Lock
Injection needle Luer-Lock hub
1,0 x 185 mm

Spezialbesteck zur transvaginalen
Injektion bei Paracervical-und
Pudendusanästhesie

Special set for transvaginal injection
for paracervical anesthesia as well
as anesthesia of the pudendus

Geburtshilfe – Obstetrics

Amniotom, Blasensprenger

Amniotome, Membrane Puncturing Forceps

Stethoskope für die Geburtshilfe siehe Rubrik AC

Obstetrical stethoscopes see section AC




BEACHAM

ET102R

Amniotom

Amniotome

240 mm, 9 1/2"

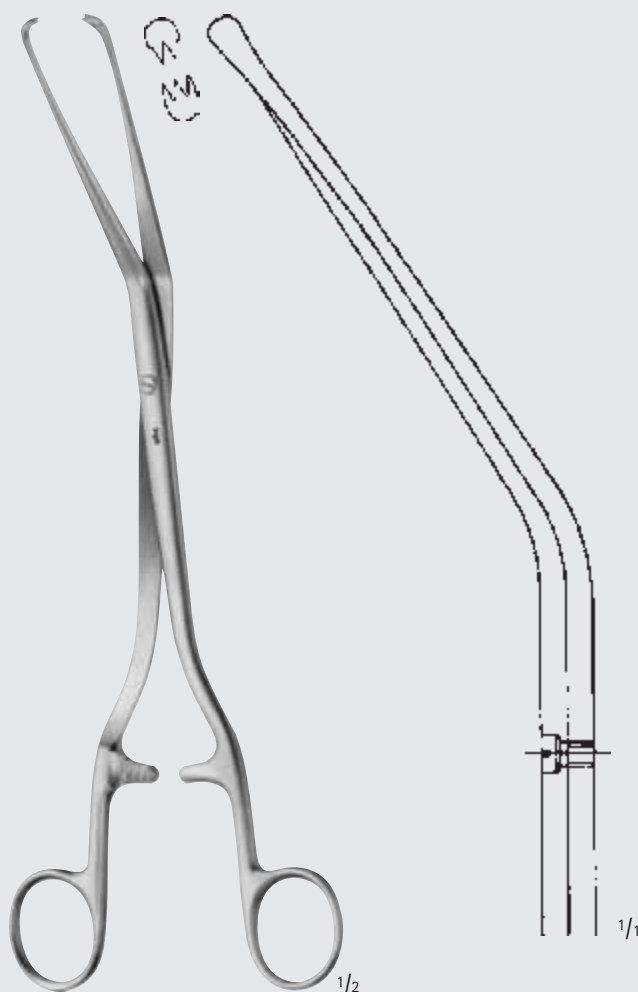

HERFF

ET106R

Blasensprenger

Membrane puncturing forceps

255 mm, 10"

ET






Geburtshilfe – Obstetrics

Nabelschnurscheren


Umbilical Cord Scissors

13**SCHUHMACHER****ET150R**

Nabelschnurschere
Umbilical cord scissors
155 mm, 6"

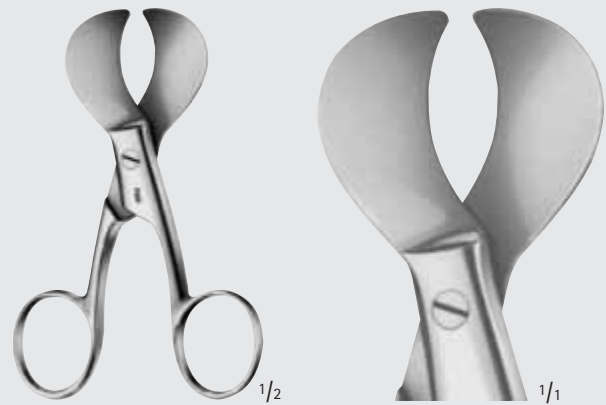**ET152R**

Nabelschnurschere
Umbilical cord scissors
105 mm, 4 1/8"

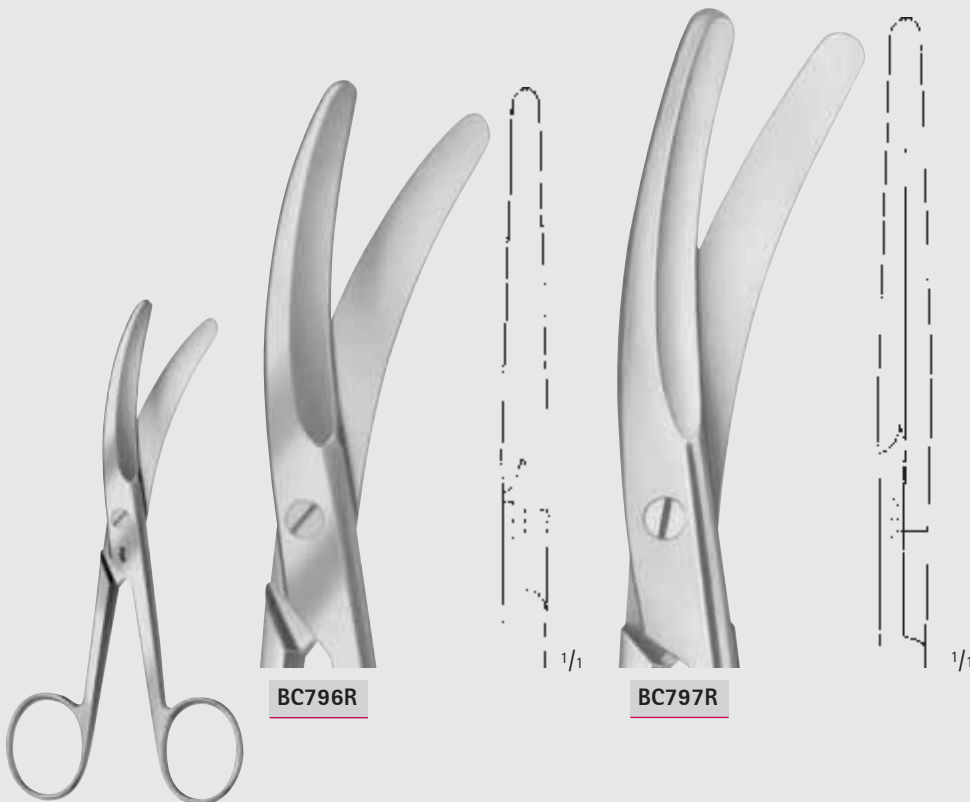**BC796R****BC797R**

BC796R	135 mm	5 1/4"
---------------	--------	--------

BC797R	160 mm	6 1/4"
---------------	--------	--------

Nabelschnurscheren
Umbilical cord scissors



MILLIMETERS

Geburtshilfe – Obstetrics

Dammscheren, Nabelschnurdilatator, Nabelschnurklemme

Episiotomy Scissors, Umbilical Dilator, Umbilical Cord Clamp



BRAUN-STADLER

ET140R 145 mm 5 3/4"

ET141R 200 mm 8"


Dammscheren

Episiotomy scissors



ET140R

1/1

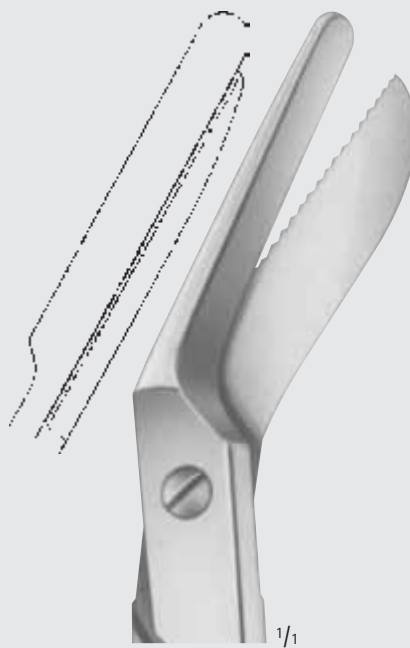

ET141R

1/1



ET142R

Dammschere

Episiotomy scissors

240 mm, 9 1/2"

1/1



1/1

ET130R

Nabelschnurdilatator

Umbilical dilator

95 mm, 3 3/4"



1/2

COLLIN

ET160R

Nabelschnurklemme

Umbilical cord clamp

85 mm, 3 3/8"




Geburtshilfe – Obstetrics

Vakuum-Extraktion bei der Geburtshilfe

Vacuum Extraction for Obstetrics

13

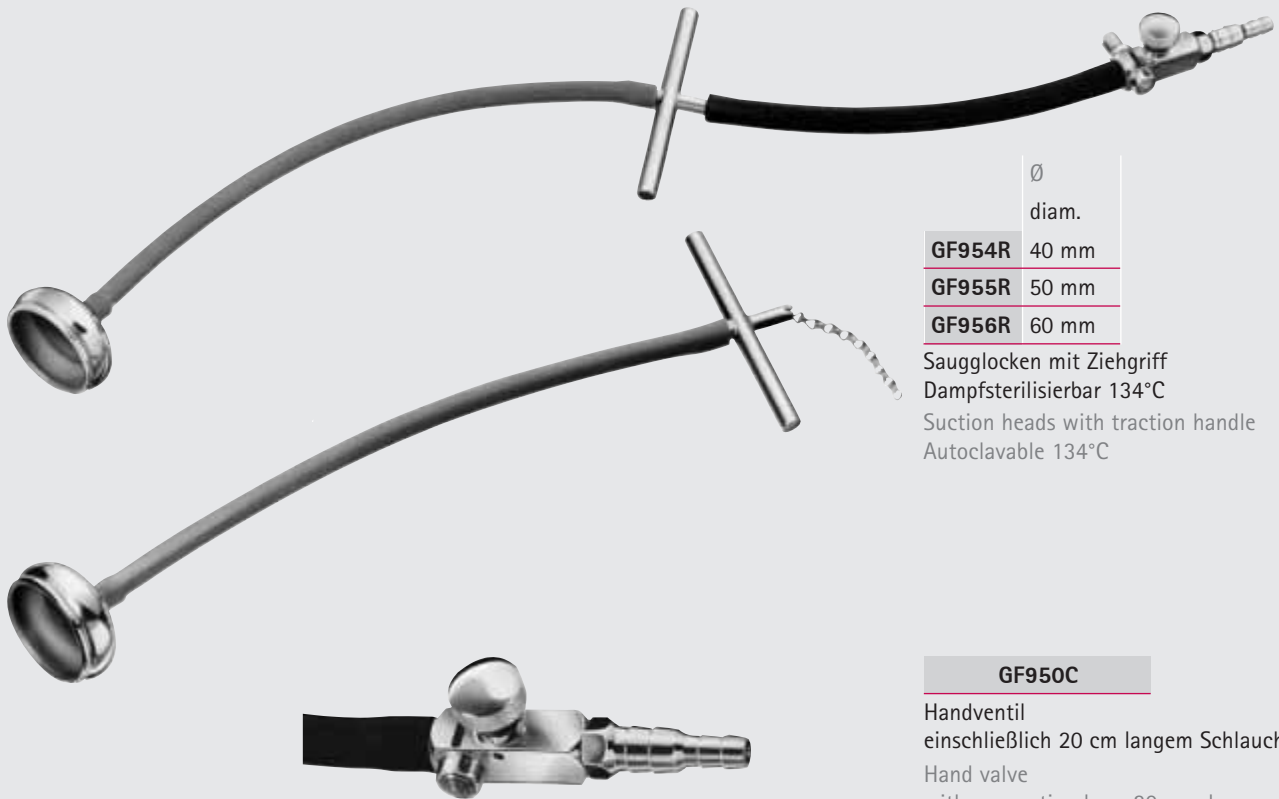

	Ø diam.
GF954R	40 mm
GF955R	50 mm
GF956R	60 mm

Saugglocken mit Ziehgriff

Dampfsterilisierbar 134°C

Suction heads with traction handle
Autoclavable 134°C

GF950C

Handventil
einschließlich 20 cm langem Schlauch

Hand valve
with connection hose 20 cms long

Mit dem Handventil GF950C können die Aesculap-Sauger auch zur Vakuum-Extraktion nach Malmström verwendet werden. Das Vakuum-Handventil GF950C ist auch an zentrale Sauganlagen anschließbar.

With the hand valve GF950C Aesculap electric suction pumps can also be used for Malmström vacuum extraction. The vacuum hand valve GF950C can also be connected to central suction system.

Funktionsweise: Das benötigte Vakuum ist durch die Regulierschraube beliebig voreinstellbar und veränderbar und besteht bis zum geschlossenen Stoppschieber. Sobald man den Stoppschieber öffnet, d.h. von links nach rechts drückt, wird die aufgesetzte Saugglocke unmittelbar unter das eingestellte Vakuum gesetzt. Zum sofortigen Absetzen der Saugglocke braucht der Stoppschieber nur geschlossen zu werden, wodurch das Vakuum der Saugglocke spontan zusammenbricht, während das Vakuum in der Saugflasche voll erhalten bleibt und nicht immer wieder zeitraubend neu aufgebaut werden muß.

Function: The vacuum required can be constantly preset by the adjusting screw. This vacuum exists then up to the closed quick-shutter, thus the vacuum in the suction head is pressed from the left to the right, the mounted suction head is immediately put under the preset vacuum. In case the preset vacuum has to be changed, this can be done with the adjusting screw. For immediate removal of the suction head simply close the quick-shutter, thus the vacuum in the suction head is eliminated at once whereas the vacuum in the suction jar remains unchanged.



GF957

Saugglocke aus Silicon-Gummi, Ø 60 mm,
mit 1,5 m Siliconschlauch

Dampfsterilisierbar 134°C

Suction head, made of silicone, 60 mm diam.,
with silicone tube 1.5 m long
Autoclavable 134°C




MILLIMETERS

Geburtshilfe – Obstetrics

Geburtszangen

Obsterical Forceps

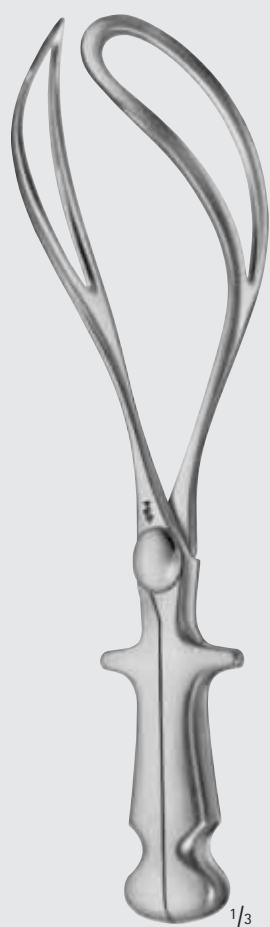

NÄGELE

ET205R

355 mm, 14 $\frac{1}{8}$ "



KIELLAND

ET210R

420 mm, 16 $\frac{3}{4}$ "



Geburtshilfe – Obstetrics

Geburtszangen Obsterical Forceps

13



SIMPSON-BRAUN

ET220R

305 mm, 12"



SIMPSON-BRAUN

ET221R

350 mm, 14"



PIPER

ET237R

für nachkommenden
Kopf bei Steißblagen
for delivery of the after
coming head in breech
presentation
445 mm, 17 1/2"



MILLIMETERS

Geburtshilfe – Obstetrics

Geburtszangen

Obsterical Forceps

ET



$\frac{1}{3}$

SIMPSON

ET245R

für sectio caesarea
(Schnittentbindung)

for caesarean section

235 mm, 9 $\frac{1}{4}$ "



$\frac{1}{3}$

WRIGLEY

ET246R

für sectio caesarea
(Schnittentbindung)

for caesarean section

250 mm, 10"



Geburtshilfe – Obstetrics

Geburtszangen Obsterical Forceps

13



TARNIER

ET251R

mit Achsenzugvorrichtung
with traction rod
400 mm, 16"



BARNES-NEVILLE

ET255R

mit Zugvorrichtung
with traction handle
435 mm, 17"



MILLIMETERS

Geburtshilfe – Obstetrics

Geburtslöffel, Uterus-Klemmzange

Obstetrics Lever, Caesarean Section Hemostatic Forceps


ET



SELLHEIM

ET270R

Geburtslöffel
Obstetric lever
300 mm, 12"

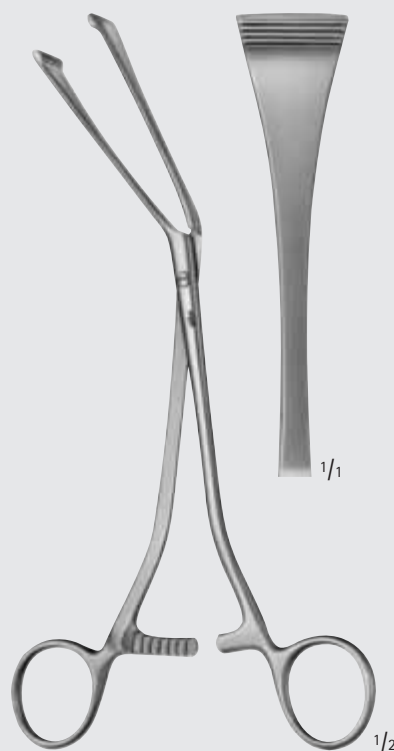

GREEN-ARMYTAGE

ET268R


Uterus-Klemmzange, abgewinkelt,
zur Blutstillung an den Schnitt-
rändern im unteren Segment bei
Kaiserschnitt-Entbindungen
Caesarean section hemostatic
forceps, angled,
for edges of the transverse
incision in the lower segment
195 mm, 7 3/4"



Geburtshilfe – Obstetrics

Uterus-Klemmzange, Kopfschwartenzange
Caesarean Hemostasis Forceps, Scalp Flap Forceps

13

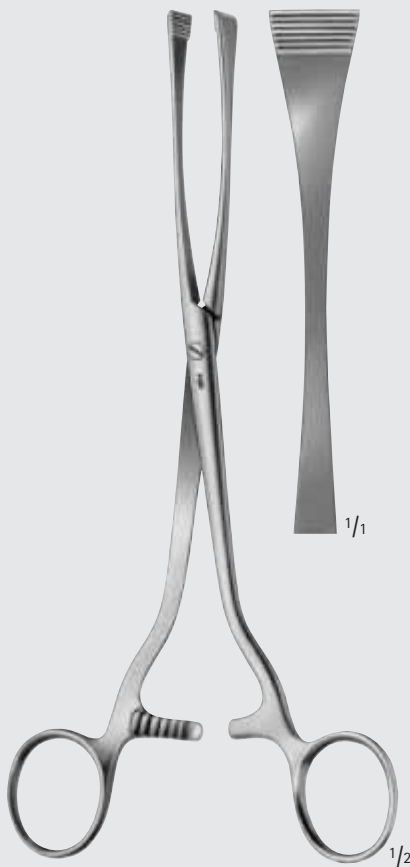

GREEN-ARMYTAGE

ET269R

Uterus-Klemmzange zur Blutstillung
an den Schnitträndern im unteren
Segment bei Kaiserschnitt-
Entbindungen

Caesarean section haemostatic
forceps, for edges of the transverse
incision in the lower segment

220 mm, 8 $\frac{3}{4}$ "



WILLETT

FF011R

Kopfschwartenzange

Scalp flap forceps

185 mm, 7 $\frac{1}{4}$ "



MILLIMETERS

Geburtshilfe – Obstetrics

Plazentar- und Abortuszangen

Plazenta- and Ovum Forceps



Fig. 1

Fig. 2

ET301R

ET302R



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

ET306R

ET307R

ET308R



Fig. 2

Fig. 3

ET315R

ET316R



WINTER

ET301R-ET302R

290 mm, 11 1/2"



WINTER

ET306R-ET308R

290 mm, 11 1/2"



WINTER

ET315R-ET316R

mit Sperre
with ratchet
290 mm, 11 1/2"





Geburtshilfe – Obstetrics

Plazentar- und Abortuszangen

Placenta- and Ovum Forceps


ET



SAENGER

ET325R


285 mm, 11 1/4"

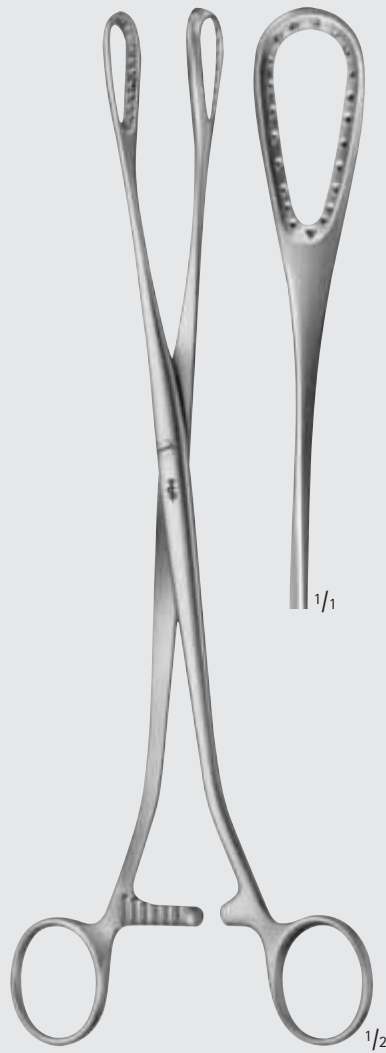

SAENGER

ET326R

275 mm, 10 3/4"

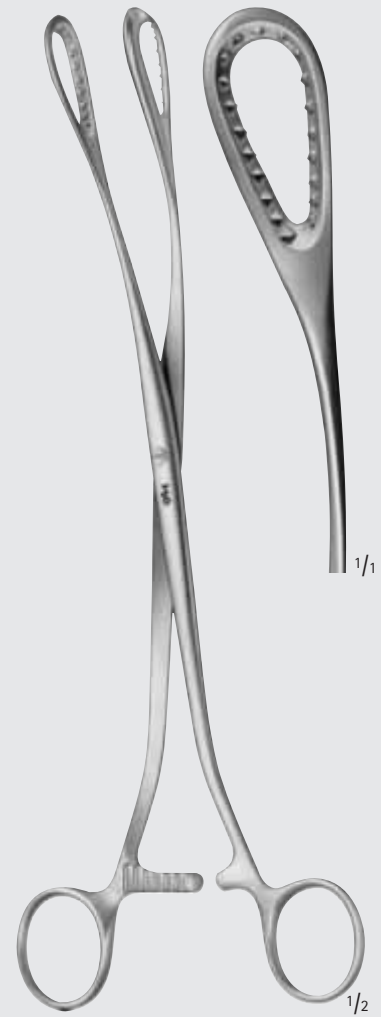

SAENGER

ET327R

265 mm, 10 1/2"



MILLIMETERS

Geburtshilfe – Obstetrics

Plazentar- und Abortuszangen

Placenta- and Ovum Forceps

ET




mit Schutzklappe
with protecting cap



AESCULAP

ET320R

285 mm, 11 1/4"

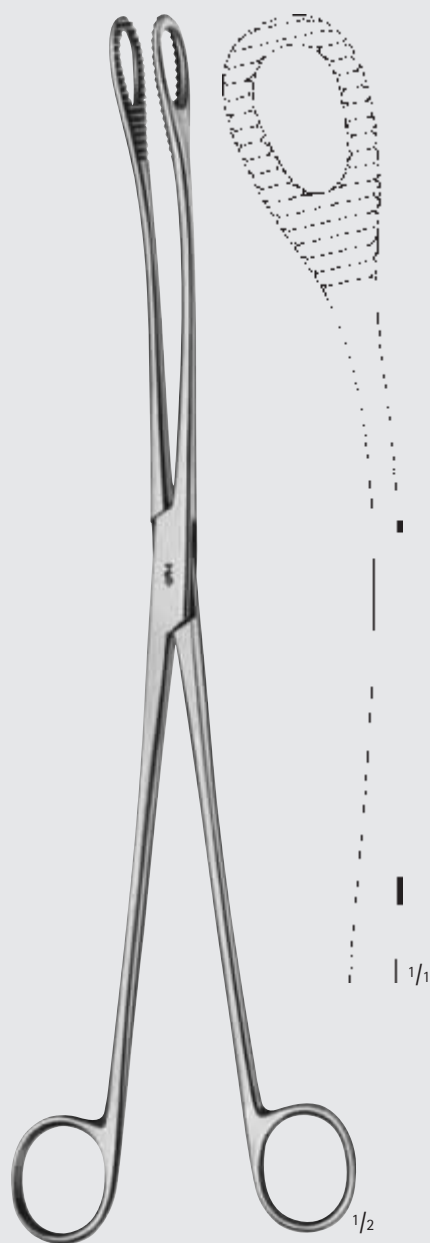

KELLY

BF135R

320 mm, 12 3/4"




Geburtshilfe – Obstetrics

Plazentar- und Abortuszangen

Plazenta- and Ovum Forceps

ET

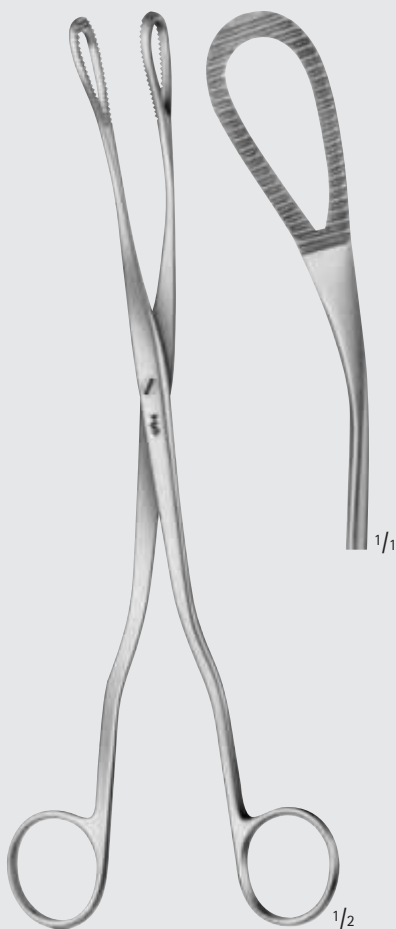

MC CLINTOCK

ET329R

240 mm, 9 1/2"



MILLIMETERS