



LINHA DE ACESSÓRIOS PARA TERAPIA DE INFUSÃO

SISTEMAS COMPLEMENTARES AVANÇADOS PARA
UMA TERAPIA INFUSIONAL SEGURA.

A linha de acessórios B. Braun foi desenvolvida voltada para as mais variadas e complexas aplicações da terapia infusional. Visando sempre o máximo de segurança e praticidade, os nossos acessórios são a garantia de um sistema preciso, seguro e confiável durante todo o processo de preparação e administração da solução.

CONTEÚDO

04 SISTEMA DE FILTROS – LINHA STERIFIX® E INTRAPUR® PLUS

06 SISTEMA DE TORNEIRAS – LINHA DISCOFIX® C

08 EXTENSÕES MULTI-VIAS – LINHA POLIFIX

10 EXTENSÕES DE VIA ÚNICA – LINHA EXTENSOFIX

11 OCLUSORES E ADAPTADORES

SISTEMA DE FILTROS

LINHA STERIFIX® E INTRAPUR® PLUS



FILTROS INTRAVENOSOS B. BRAUN – MÁXIMA EFICIÊNCIA E PROTEÇÃO.

Dado o amplo espectro de complicações causadas por partículas de plástico, vidro e borracha, a contaminação por partículas pode contribuir para o prolongamento do período de internação assim como aumentar os custos com tratamento adicionais.

Considerando a severidade das complicações diretas e indiretas, a prevenção referente à entrada de partículas estranhas no sistema circulatório do paciente pode resultar em uma redução significativa de custos para o hospital.



Linha Sterifix®



Intrapur® Plus

RISCOS ASSOCIADOS À PRESENÇA DE PARTÍCULAS NO SISTEMA CIRCULATÓRIO


- Comprometimento da microcirculação
- Obstrução de vasos sanguíneos
- Danos à diversos órgãos
- Flebite Química

BENEFÍCIOS

- Retenção de partículas, bactérias, fungos e endotoxinas*
- Proteção contra embolia aérea
- Detecção de incompatibilidades
- Redução de complicações como flebites e infecções
- Redução do período de internação
- Redução de custos

*Intrapur Plus somente.

Funcionamento dos filtros de infusão Intrapur® e Sterifix®

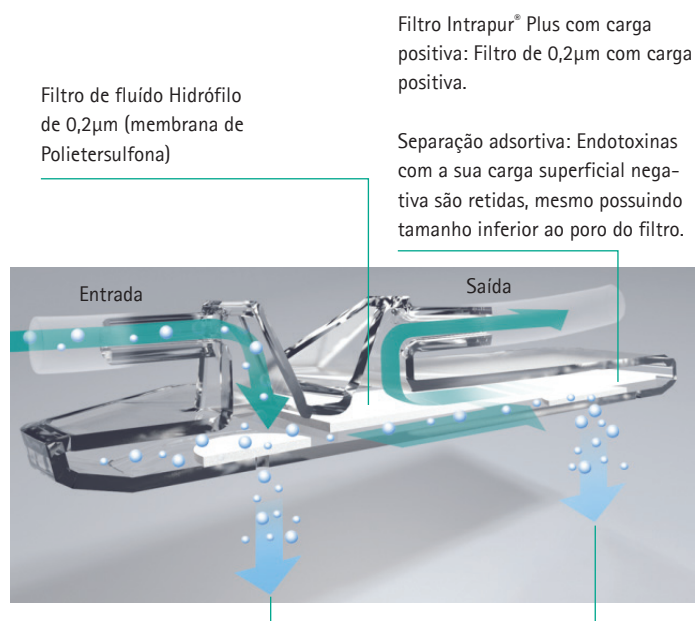

Os filtros de infusão da B. Braun previnem a Embolia Gasosa através de duas membranas Hidrófobas de 0,02µm produzidas em Politetrafluoretileno (PTFE). Estes dois filtros permitem a saída segura do ar durante o uso, independente da posição do mesmo.

Código	Material Tubo	Extensão	Porosidade	Injetor lateral	Filtro PrimeStop®	Conector Proximal	Conector Distal
120015	PVC FREE	16 cm	0,2µm	Não	Sim	Luer Lock	Luer Lock Rotativo
120016	PVC FREE	41 cm	0,2µm + Carga Positiva	Sim	Sim	Luer Lock	Luer Lock Rotativo

SISTEMAS DE TORNEIRAS LINHA DISCOFIX® C



DEPOSITE SUA CONFIANÇA NO SISTEMA DISCOFIX® C!

Esta nova geração de sistemas de torneiras atendem aos desafios do progresso constante da Medicina.

O Discifix® C combina um revolucionário material com a experiência de mais de 20 anos da B. Braun. Suas excepcionais propriedades o tornam exclusivamente resistente à rachaduras e fissuras, eliminando totalmente os riscos e a necessidade de monitoramento constante associados aos sistemas convencionais.

Progrida para um nível rigoroso de segurança e conveniência com o Discifix® C!

ACESSO RÁPIDO, FÁCIL E SEGURO

O adaptador rotativo permite uma conexão rápida e fácil, garantindo um sistema seguro e confiável. Uma vez conectado, o Discifix® C pode ser rotacionado em torno do seu eixo. Esta característica exclusiva, além de evitar possíveis desconexões acidentais, torna mais conveniente o processo de injeção e aspiração, uma vez que permite que o acesso seja girado em direção ao profissional de saúde quando a conexão de uma seringa ou linha de infusão for necessária.

SINTA O AJUSTE CORRETO

Com o Discifix® C, é possível sentir um suave clique a cada 45° de giro da torneira. Esta resposta tátil permite a identificação da posição correta imediatamente. Ajustes precisos são mais rápidos e fáceis!

DISCOFIX® C – TESTE COMPARATIVO COM OUTROS SISTEMAS REFERÊNCIA NO MERCADO

As características excepcionais desta nova geração de torneiras foi testado por institutos independentes e atestado pelos profissionais de saúde mais exigentes. Todos os estudos mostraram que até mesmo os fármacos mais potentes não afetam o Discifix® C, mesmo durante longos períodos de infusão.

“O solvente presente na Fenitoína Sódica para infusão, é capaz de atacar rapidamente os sistemas de torneiras convencionais feitos de plástico. Ex: Policarbonato.”*

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

- Adaptador rotativo proporciona total conveniência de acesso durante a administração e aspiração na via de acesso
- Resposta tátil a cada 45° permite que você sinta o ajuste correto imediatamente
- Produto em Poliamida permite o uso 100% seguro com Quimioterápicos e Drogas potentes

*Ver instruções de uso.

Código	Material Tubo	Extensão	Nº Torneiras	Conector Proximal	Conector Distal
16496C	Não aplicável	Não aplicável	1 (Needle-Free)	Luer Lock (Adaptador Rotativo)	Luer Lock
16600C	Não aplicável	Não aplicável	3 (Needle-Free)	Luer Lock (Adaptador Rotativo)	Luer Lock
16608C	Não aplicável	Não aplicável	5 (Needle-Free)	Luer Lock (Adaptador Rotativo)	Luer Lock
409100	PVC-DEHP Free	30 cm	1 (Needle-Free)	Luer Lock (Adaptador Rotativo)	Luer Slip

- Mantém a conexão livre de vazamentos mesmo em infusões de longa duração
- Previne vazamentos, contaminações e embolia aérea
- Torneiras com identificação por cores permite a fácil associação de Drogas à mesma
- Acesso rápido livre de agulhas (Needle-Free)
- Permite melhor organização das linhas de infusão
- Torneiras com indicadores de direção do fluxo



RACHADURAS EM SISTEMAS DE TORNEIRAS – UM PROBLEMA QUE PODE LEVAR À SERIAS COMPLICAÇÕES.


Sistemas de Torneiras são partes indispensáveis de um sistema de infusão e desempenham um papel fundamental em terapias infusionais de alta complexidade. Drogas potentes, como anestésicos, citostáticos, antibióticos, narcolépticos e imunossupressores, associadas à frequente manipulação, podem causar danos severos (fissuras e rachaduras) nos sistemas de torneiras. Emulsões lipídicas e a própria rotina de desinfecção podem agravar o problema, acarretando eventualmente em vazamentos, contaminações e até mesmo embolia aérea, colocando em risco os profissionais de saúde e pacientes.

Nunca comprometa a segurança quando a mesma pode ser assegurada!

EXTENSÕES MULTIVIAS LINHA POLIFIX



Os extensores multivias de linhas venosas, permitem a administração simultânea (contínua ou intermitente) de medicações compatíveis a partir de um mesmo acesso. Alinhado ao conceito de segurança preconizado na NR 32, a linha Polifix conta também com versões Needle-Free que dispensam a necessidade do uso de agulhas durante a administração de medicamentos, contribuindo assim para uma Terapia infusional mais segura.

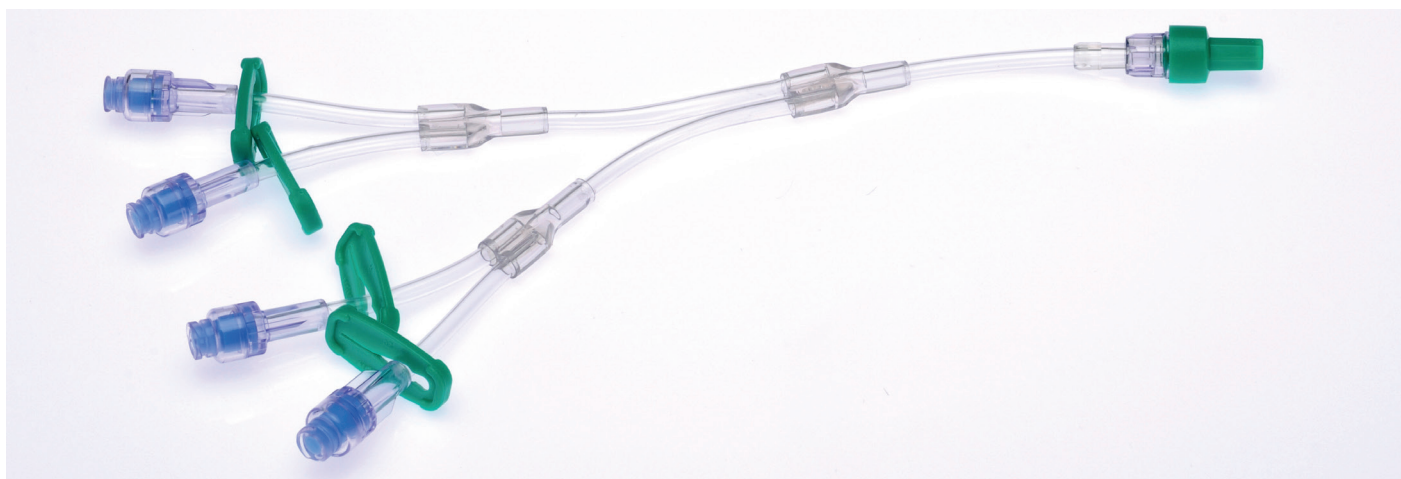

BENEFÍCIOS DA LINHA POLIFIX SAFEFLOW:

- Administração de medicamentos livre de agulha: terapia infusional mais segura (NR 32).
- Dispensa a utilização de oclusores, acarretando em significativa redução de custos uma vez que os mesmos devem ser trocados a cada manipulação.
- Menor manipulação das vias: sistema fechado de infusão.
- Design inovador proporciona uma assepsia fácil e eficiente da válvula, reduzindo drasticamente os riscos de infecção.
- **Extensores multivias 100% livres de DEHP e Látex: segurança do paciente em primeiro lugar.**

DEHP-FREE

Código	Descrição	Material Tubo	Extensão	Nº Vias	Injetor lateral	Conector Proximal	Conector Distal	Filtro PrimeStop®
409002	Polifix 2	PVC-DEHP Free	17cm	2	Não	Luer Lock	Luer-Slip	Não
409002S	Polifix 2 Safeflow	PVC-DEHP Free	17cm	2	Não	Luer Lock/ Needle-free	Luer Lock Rotativo	Sim
409004S	Polifix 4 Safeflow	PVC-DEHP Free	25cm	4	Não	Luer Lock/ Needle-free	Luer Lock Rotativo	Sim
409062	Polifix 2 IL Longo	PVC-DEHP Free	78cm	2	Sim	Luer Lock	Luer-Slip	Não
409102	Polifix 2 Spin-Lock	PVC-DEHP Free	17cm	2	Não	Luer Lock	Luer Lock Rotativo	Sim
409172	Polifix 2 Neo	PVC	Tubo Neo -16cm	2	Não	Luer Lock	Luer-Slip	Não

EXTENSÕES DE VIA ÚNICA

LINHA EXTENSOFIX



Os extensores de linhas venosas permitem maior mobilidade tanto do profissional de saúde quanto do paciente, reduzindo drasticamente o risco de desconexões acidentais. Toda linha Extensofix conta com o avançado filtro PrimeStop®, que garante o preenchimento rápido, seguro e automático do Equipamento, ao mesmo tempo que evita a exposição do profissional de saúde e paciente à solução preparada.

DEHP-FREE

Código	Descrição	Material Tubo	Extensão	Conector Proximal	Conector Distal	Filtro PrimeStop®
443020	Extensofix 20cm	PVC-DEHP Free	20cm	Luer Lock	Luer Lock Rotativo	Sim
443040	Extensofix 40cm	PVC-DEHP Free	40cm	Luer Lock	Luer Lock Rotativo	Sim
443060	Extensofix 60cm	PVC-DEHP Free	60cm	Luer Lock	Luer Lock Rotativo	Sim
443120	Extensofix 120cm	PVC-DEHP Free	120cm	Luer Lock	Luer Lock Rotativo	Sim

OCLOSORES E ADAPTADORES

COMBI-RED

O Combi Red é indicado para a oclusão das vias de infusão após a administração de medicamentos, assim como ocluir Seringas (pré-preenchidas ou não) com medicações manipuladas para administração única imediata ou intermitente.

Benefícios:

- Em função da cor diferenciada, é um excelente indicador de que a via já foi manipulada ou acessada.
- Possibilidade de oclusão de cones Luer Macho e Fêmea.
- Melhor ergonomia reduz o risco de perda de pega/queda e possível contaminação com o chão ou superfícies não-estéreis.



IN-STOPPER

Permite a administração de medicamentos utilizando seringas de agulha em acessos com conectores padrão Luer Fêmea.



PROTETOR DE CONE LUER

Permite a oclusão/proteção de conectores padrão Luer Fêmea.



B. Braun Brasil | Hospital Care

Av. Eugênio Borges 1092, Arsenal | 24751-000 | São Gonçalo | RJ | Brasil

S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br

Intrapur – Filtro de Infusão de 0,2 Micra para Infusão de Soluções – Registro ANVISA nº: 10008530390 | Sterifix® Infusão – Filtro de 0,2 µm para Infusão de Soluções – Registro ANVISA nº: 10008530021 | Extensofix – Extensão para Equipo de Infusão Parenteral – Registro ANVISA nº: 10008530027 | Polifix – Equipo para infusão simultânea de soluções parenterais – Registro ANVISA nº: 10008530425 | Extensores com válvula Needle-free para equipos – Registro ANVISA nº: 80136990838 | Torneira de 3 vias com Tubo de extensão – Registro ANVISA nº: 80136990556 | Combi Red – Tampa de Uso Versátil com Conector Luer Lock Interno e Externo – Registro ANVISA nº: 10008530103 | Protetor para Cone Luer – Registro ANVISA nº: 10008530198 | Família de Torneira em Três Vias – Registro Anvisa nº: 80136990452 / In Stopper – Tampa com membrana sem látex para injeções intermitentes – Registro Anvisa nº: 10008530113

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:



[/bbraunbrasil](https://www.facebook.com/bbraunbrasil) | [/bbraunbrasil](https://www.youtube.com/bbraunbrasil) | [@bbraunbrasil](https://twitter.com/bbraunbrasil)

