



AESCULAP® Celsite® Spinal

Port e cateter totalmente implantáveis, com acesso epidural – ou intratecal – para administração espinal de medicamentos para alívio da dor crônica e oncológica

PORT DE ACESSO ESPINHAL OU EPIDURAL



PARA ADMINISTRAÇÃO ESPINHAL DE MEDICAMENTOS PARA ALÍVIO DA DOR CRÔNICA E ONCOLÓGICA.

- Port e cateter totalmente implantáveis, com acesso epidural – ou intratecal – para administração espinal de drogas para tratamento da dor crônica e oncológica
- O cateter totalmente implantável navega sob a pele até o port, que é implantado na base das costelas
- Leve, confortável, para uso amplo e seguro
- Possui um design ergonômico que facilita a sua implantação
- Com ampla gama de indicações, os ports de acesso Celsite® Spinal tem um filtro integrado de titânio de 20µm, impedindo a passagem de partículas
- Celsite® Spinal oferece cateteres peridurais e espinais para escolha da via de acesso
- Redução de custos no tratamento da dor crônica clinicamente intratável e oncológica

Cateter

Cada kit do Access Port contém dois cateteres:


- Cateter de Poliamida (PA) com ponta fechada e multi-perfurada
- Cateter de Poliuretano (PUR) de ponta aberta com um fio-guia revestido com Teflon

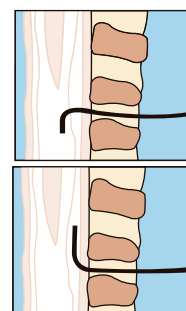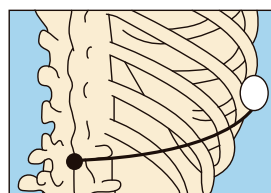

Catheter	OD	OD (mm)	ID (mm)	Length (mm)	Flow rate* (ml/min)		Implantation technique	Type	Reference
					19G	22G			
Standard									
PUR and PA	19G	1.05	0.6	1000	3	3	spinal/epidural	ST304-19	4430096
PUR and PA	20G	0.86	0.45	1000	1	1	spinal/epidural	ST304-20	4430097

Acessórios:

- Parafusos conectores (2x)
- Agulha Perican Tuohy 16G (ST304-19) ou agulha Tuohy 18G (ST304-20)
- Chave de fenda
- Dispositivo anti-kink (2x)
- Filtro Perifix 0.2µm
- Haste de tunelamento
- Bisturi Tamanhos 10 e 11
- Surecan Winged 20g x 20mm
- Agulha Sterican 20G x 70mm
- Seringa Omnifix 10ml
- Seringa Perifix LOR
- Surecan Reta 22G x 30mm (2x)

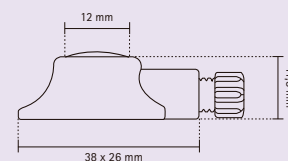

Material: Polysulphone | Titanium-Filter
Weight: 6 g
Internal Volume: 0.33 mL

* Taxas de fluxo gravitacional estabelecidas por infusão gravitacional de NaCl 0,9%, altura 1m. Comprimento do cateter 40cm. De acordo com a ISO 10555-1.

B. Braun Brasil | Aesculap | S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br
AESCULAP® – a B. Braun brand

Registro ANVISA: 80136990518

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:

[facebook](#) [YouTube](#) [twitter](#)
/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil

